



MD-3a 933

GÉZATONE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА И МАССАЖА ЛИЦА, СЕРИИ MD-3A,
МОДЕЛЬ 933, БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Поздравляем Вас с приобретением прибора для лица, шеи и зоны декольте, сапфировой микродермабразии MD-3a 933.

Перед началом эксплуатации прибора, внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и сохраните её для дальнейшего использования!

ВВЕДЕНИЕ

Микродермабразия относится к категории механических пилингов и является прекрасной альтернативой лазерному и химическому пилингу, это безболезненный метод удаления омертвевших клеток эпидермиса, не требующий восстановительного периода.

ПРОЦЕДУРА МИКРОДЕРМАБРАЗИИ ОКАЗЫВАЕТ МНОЖЕСТВО ЭФФЕКТОВ:

- осветляет пигментные пятна и выравнивает цвет лица;
- ускоряет процессы регенерации клеток кожи;
- способствует уменьшению глубины морщин;
- улучшает кровообращение и повышает тонус кожи;
- борется со шрамами и рубцами постакне;
- улучшает общий внешний вид кожи, делая ее более гладкой и эластичной;
- является эффективной профилактикой преждевременного старения кожи лица, шеи и зоны декольте.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОПАСНО



Устройство нельзя использовать вблизи воды или под водой (например, в раковине, в душевой или ванной) - опасность поражения электрическим током!

ВАЖНО



Прибор должен эксплуатироваться только так, как описано в руководстве пользователя, с помощью прилагаемого блока питания при сетевом напряжении, указанном на блоке питания. Только квалифицированный специалист может выполнять ремонт электрооборудования. Неправильный ремонт может быть опасным для здоровья. В случае неисправности или повреждения отремонтируйте устройство в сертифицированной специализированной мастерской.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Не используйте прибор

- На поврежденной коже.
- На открытых ранах.
- В области глаз и губ.
- На любом другом участке тела, кроме лица.
- При наличии кожных заболеваний (например: герпес, сосудистые заболевания или новообразования на коже).
- При раке кожи.
- При раздражениях на коже.
- Сразу после загара или при солнечном ожоге.
- При употреблении лекарств, содержащих в составе стероиды.
- При употреблении лекарств, разжижающих кровь.
- При рассеянном склерозе, диабете или аутоиммунном расстройстве.



Не используйте прибор

- На поврежденной коже.
- На открытых ранах.
- В области глаз и губ.
- На любом другом участке тела, кроме лица.
- При наличии кожных заболеваний (например: герпес, сосудистые заболевания или новообразования на коже).
- При раке кожи.
- При раздражениях на коже.
- Сразу после загара или при солнечном ожоге.
- При употреблении лекарств, содержащих в составе стероиды.
- При употреблении лекарств, разжижающих кровь.
- При рассеянном склерозе, диабете или аутоиммунном расстройстве.

Устройство содержит перезаряжаемую литий-полимерную батарею. В целях охраны окружающей среды, пожалуйста, не избавляйтесь от прибора вместе с бытовым мусором в конце срока его использования. Утилизация должна проводиться на соответствующем месте сбора.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Точечная насадка с тонким сапфировым покрытием, подходящая для точной обработки небольших областей (например, в области носа и кожи вокруг глаз).
2. Крупная насадка с более грубым сапфировым покрытием, подходящая для интенсивного воздействия на проблемные участки кожи.
3. Большая насадка с тонким сапфировым покрытием, подходящая для чувствительной кожи.
4. Роликовая насадка для омолаживающих процедур, уменьшения морщин и гусиных лапок. Используется в режиме МАССАЖ, комфортно воздействуя на кожу.
5. Кнопка питания включения/выключения питания.
6. Индикатор зарядки и индикатор 3-х уровней интенсивности.
7. База зарядного устройства.
8. Разъем на базе для подсоединения шнура адаптера питания (зарядного устройства).
9. Разъем на приборе для подсоединения шнура адаптера питания (зарядного устройства) или для подсоединения к базе.

*Адаптер питания/зарядное устройство на изображении не показан.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ПРИМЕЧАНИЕ

Процедуры лучше всего проводить в вечернее время, чтобы утром насладиться свежей и сияющей кожей!

Прежде чем приступить к использованию прибора, тщательно очистите лицо от загрязнений и макияжа. Протрите лицо влажным полотенцем, кожа не должна быть слишком сухой, но наносить какие-либо косметические средства не нужно.

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТА НА КОЖЕ

Проведите тест на коже за 24 часа до использования устройства. Испытайте устройство на самом низком уровне интенсивности на небольших, незаметных участках шеи. Если через 24 часа эта область красная или болезненная, не используйте устройство.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



- Не используйте устройство чаще 1 раза в неделю.
- Сразу после использования обработанная кожа может слегка покраснеть, и, в очень редких случаях, могут быть небольшие пятна кровотечений под кожей.
- Избегайте воздействия прямых солнечных лучей, не посещайте солярий, используйте солнцезащитный крем с SPF-50 непосредственно после процедуры и в течение ближайших 2-3 дней.
- Не посещайте сауну в течение 10-15 дней после процедуры.
- Чтобы избежать аллергической реакции на компоненты декоративной косметики, НЕ рекомендуем наносить макияж непосредственно после процедуры.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Устройство можно использовать два раза в неделю для грубой, толстой и нечувствительной проблемной кожи (с перерывом не менее 48 часов между использованием).

ПРОФИЛАКТИКА УГРЕВОЙ СЫПИ

1. Регулярный пилинг предотвращает скопление кожного сала в порах и на поверхности кожи, что препятствует развитию воспалений.
2. Микродермабразия с сапфировым напылением стимулирует обмен веществ, удаляя ороговевшие чешуйки, ускоряет процессы регенерации клеток кожи.
3. После очищения кожа гораздо эффективнее усваивает активные ингредиенты косметики, которая улучшает состояние кожи.

УХОД ЗА ВЯЛОЙ АТОНИЧНОЙ КОЖЕЙ С ВОЗРАСТНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ

1. Применение микродермабразии с сапфировым напылением позволяет повысить выработку коллагена и эластина, что приводит к тонизации и повышению упругости кожи, разглаживанию морщин.
2. Благодаря нежному отшелушиванию ороговевших частичек, кожа выглядит более свежей и молодой, гладкой и свежей.
3. Для усиления омолаживающего эффекта необходимо после процедуры пилинга нанести сыворотку, крем или маску от морщин, активные компоненты которых будут гораздо лучше усваиваться.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА И РАБОТА ОТ АДАПТЕРА ПИТАНИЯ

РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО С АДАПТЕРОМ ПИТАНИЯ, ПОСТАВЛЯЕМЫМ С ПРИБОРОМ.

- Убедитесь, что устройство выключено.
- Подключите адаптер питания к устройству.
- Подключите адаптер питания к розетке электросети (100-240 В ~ 50/60 Гц).
- Убедитесь, что устройство выключено – оно заряжается только при его выключении.
- Во время зарядки 3 индикатора будут поочередно мигать.
- Заряжайте устройство, когда производительность заметно падает.
- Когда аккумулятор полностью заряжен, все 3 светодиода будут гореть одновременно.
- Полная зарядка устройства длится около 90 минут.
- Полностью заряженное устройство можно использовать около 60 минут.

РЕЖИМ РАБОТЫ С АДАПТЕРОМ ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Убедитесь, что устройство выключено.
- Подключите адаптер к устройству.
- Подключите адаптер к розетке электросети (100-240 В ~ 50/60 Гц).
- Устройство сначала перейдет в режим зарядки.
- НАЖМИТЕ кнопку ON/OFF для включения устройства.
- Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF в течение 1 секунды, чтобы выбрать желаемую интенсивность (Hi/Med/Lo/MASSAGE).
- Загорится светодиодный индикатор, связанный с определенной интенсивностью. При выборе режима МАССАЖ, начнет мигать верхний светодиод.
- Когда закончите, НАЖМИТЕ кнопку ON/OFF для выключения.
- Режим зарядки автоматически отключается, пока устройство находится в режиме работы от сети.
- После выключения устройства оно автоматически перейдет в режим зарядки.

БЕСПРОВОДНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Перед первым использованием следуйте приведенной выше инструкции, чтобы полностью зарядить устройство.
- НАЖМИТЕ кнопку ON/OFF для включения устройства.
- Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF в течение 1 секунды, чтобы выбрать желаемую интенсивность (Hi/Med/Lo/MASSAGE).
- Загорится светодиодный индикатор, связанный с определенной интенсивностью. При выборе режима МАССАЖ, начнет мигать верхний светодиод.
- Когда закончите, НАЖМИТЕ кнопку ON/OFF для выключения.
- Устройство автоматически запоминает последнюю интенсивность работы.

ФУНКЦИЯ САМОБЛОКИРОВКИ

Устройство имеет функцию самоблокировки, которая позволяет Вам брать его с собой во время путешествия, не используя заряд батареи, из-за случайно включенного устройства внутри Вашей дорожной сумки.

Блокировка:

НАЖМИТЕ и удерживайте кнопку ON/OFF в течение, примерно 5 секунд, пока не загорится 3 светодиода, затем отпустите. Устройство заблокировано.

Разблокировка:

- Способ 1. Быстро нажмите кнопку ON/OFF 2 раза в течение 2 секунд, все 3 светодиода загорелись в течение 2 секунд, функция блокировки была отменена, устройство теперь готово к использованию.
- Способ 2. Подключите адаптер питания к устройству и в электросеть, устройство автоматически разблокируется и перейдет в режим зарядки.


ТАЙМЕР АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

Устройство автоматически отключится через 5 минут работы, чтобы избежать израсходования заряда батареи из-за того, что устройство не было заблокировано и случайно включилось внутри Вашей дорожной сумки.

НИЗКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ

Когда заряд батареи низкий, светодиодный индикатор будет мигать, и Вы должны зарядить устройство. Если во время обработки появилась индикация низкого заряда батареи, Вы можете перейти в режим работы от сети, чтобы продолжить процедуру.

ОТСОЕДИНЕНИЕ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ НАСАДОК

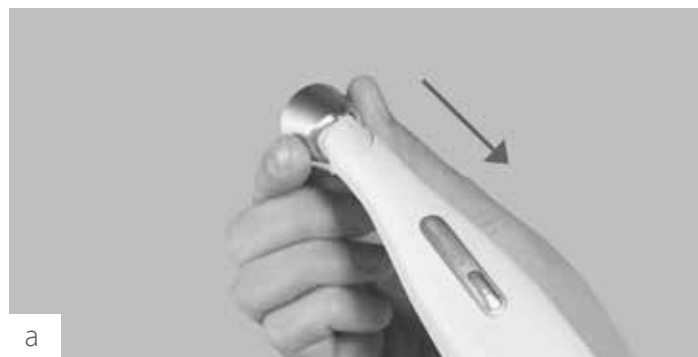

ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Обязательное условие при использовании прибора: кожа лица, шеи или зоны декольте в месте воздействия прибором должна быть натянута. Для этого необходимо, пальцами сво-

бодной руки потянуть кожу в сторону, противоположную направлению движения прибора.



ЛОБ

Медленно ведите устройство из центра лба к периферии. Каждый участок может быть обработан только 1 раз.



ЩЕКИ

Ведите устройство по щекам из центра к периферии.



ВИСКИ

Медленно ведите устройство по коже в сторону начала роста волос. Повторите на каждой стороне по 1 разу. Держите устройство минимум в 1 см от глаз.



ОБЛАСТЬ ВОКРУГ РТА

Ведите устройство вдоль верхней губы от центра в левую и правую сторону по очереди. От подбородка двигайтесь наверх. Не затрагивайте губы.



НОС

Медленно ведите устройство от основания носа вниз к его кончику. Затем повторите это на крыльях носа.



ШЕЯ И ЗОНА ДЕКОЛЬТЕ

Медленно ведите устройство снизу вверх. Каждый участок может быть обработан только 1 раз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АДАПТЕР ПИТАНИЯ/ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	АС 100...220В, 50 Гц/5В, 1 А
СОЗДАВАЕМОЕ РАЗРЯЖЕНИЕ	45-60 кПа
РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ	218x218x56 мм
ВЕС В УПАКОВКЕ	500 г.
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	20...35С
ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ	20...85%
КОМПЛЕКТАЦИЯ	микродермабразия MD-3а 933 (основной блок) - 1 шт.
	подставка - 1 шт.
	насадки - 4 шт.
	инструкция - 1 шт.
	запасные фильтры - 20 шт.
	адаптер питания - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

- Никогда не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- После каждого использования рекомендуется дезинфицировать насадки нейтральным средством. Не используйте средства, способствующие повреждению пластиковых деталей прибора!
- Производите смену одноразовых фильтров после каждого использования.
- Используйте сухую ткань для очистки устройства от грязи. Не используйте абразивные чистящие средства.
- Защитите устройство от ударов, влаги, пыли, химических веществ, заметных колебаний температуры и близлежащих источников тепла (печи, нагреватели).

УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕИ

Этот прибор содержит литий-полимерную батарею. Чтобы защитить окружающую среду, этот прибор и его батареи должны быть утилизированы. По истечении срока службы, пожалуйста, сдайте это устройство в центр утилизации, где внутренняя перезаряжаемая батарея должна быть удалена специалистом и переработана отдельно.

Для получения дополнительной информации об утилизации электрических и аккумуляторных приборов обратитесь в местный совет или в службу по утилизации бытовых отходов.

GEZATONE

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА И МАССАЖА ЛИЦА, СЕРИИ MD-3A,
МОДЕЛЬ 933, БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, Т. М. «GEZATONE»

Изготовитель: «Gezanne I.T.C.» / «Жезанн И.Т.С.», адрес: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, France, /Сент Авертен 39 рю де Гранж Галан, Франция. Филиал Завода-изготовителя: «GREAT CATHAY PRODUCTS MFG. INC.»/»ГРЭЙТ КЭТЭЙ ПРОДАКТС МФГ. ИНК « адрес: 2 fl., No. 19, Lane 160, SUNG-CHIANG RD. Taipei, Taiwan R.O.C., / 2фл, Но. 19, Лэйн 160, Санг-Чианг Рд, Тайпей, (К.Р), Тайвань.

Импортер/уполномоченная изготовителем организация:
ООО «Митридат», Россия, г. Москва, ул. Шоссейная, д.1В, стр.
10, тел.: (495) 225-25-83

Дату производства: см. инструкцию.
Срок службы: 5 лет.

